

NEW & IMPROVED

고양이 췌장염의 정확한 진단을 위한

Vcheck fPL 2.0

진단 정확도는 높이고, 검사 과정은 더욱 간편해졌습니다!




저농도 구간에서도 뛰어난 정확도

'I'사 진단검사실과 비교해볼 때, 개선된 Vcheck fPL 2.0 ($R^2=0.98$)은 기존 제품 ($R^2=0.86$)보다 훨씬 상관성이 높습니다.

Vcheck fPL 2.0 vs. 기존 제품

('I'사 진단검사실과의 비교, n=23)

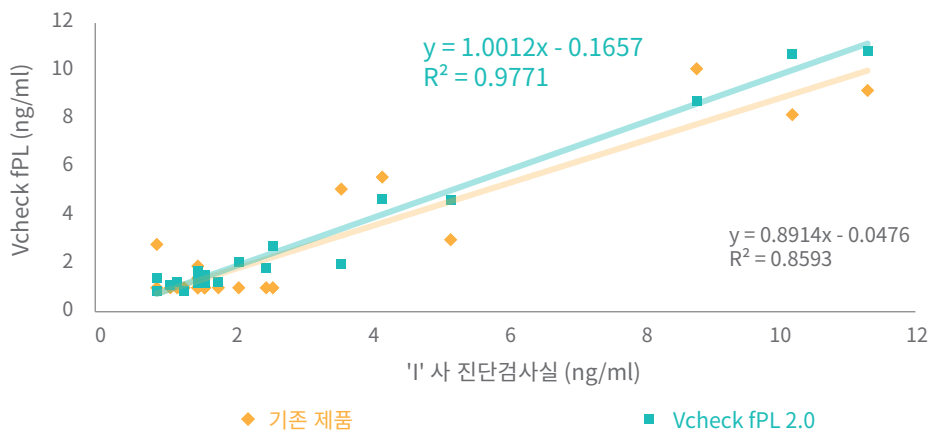


향상된 사용편리성

혈청은 물론이고, 이제는 혈장과 전혈 검체로도 검사하실 수 있습니다. 동일 개체의 혈장과 혈청에 대한 검사 결과, 매우 높은 상관성($R^2=0.99$)을 보여줍니다.


Vcheck fPL 2.0

(혈청과 혈장 검체의 비교)

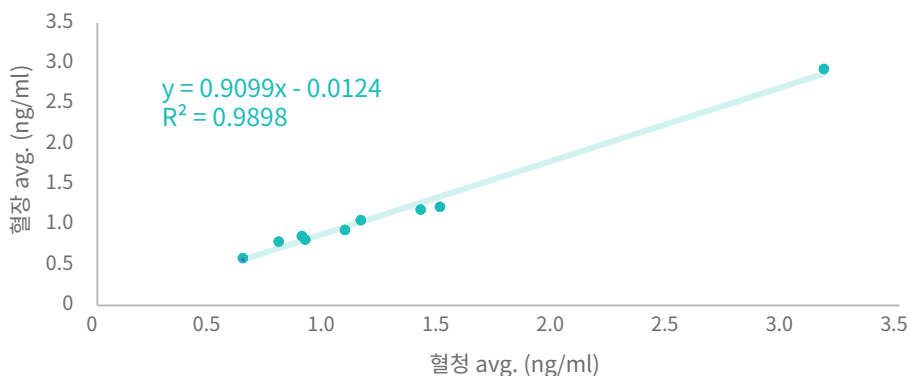

간편한 검사방법

새롭게 개선된 Vcheck fPL 2.0의 검사 과정은 매우 간편하여 누구나 쉽게 따라 할 수 있습니다. 이를 통해, 사용상의 오류는 줄이고, 검사 결과의 재현성은 더욱 높였습니다.

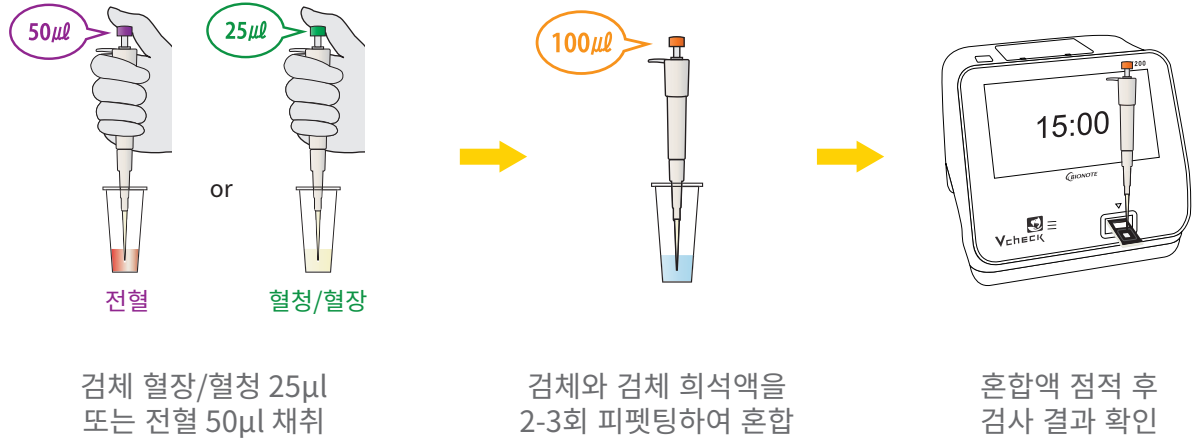

* 전혈을 검체로 사용할 경우, 개체마다 다른 헤마토크리트(Hematocrit; 적혈구 용적률) 수치를 가지고 있기 때문에 검사 결과가 상이하게 나타날 수 있습니다. 헤마토크리트 수치가 매우 낮거나(20% 이하), 매우 높을 경우(60% 이상) 각각 위양성, 위음성 결과를 유발할 가능성이 있습니다.

제품 사양

- 축 종 : 고양이
- 검 체 : 혈청, 혈장 25 µl 또는 전혈 50 µl
- 측정 범위 : 1 - 50 ng/ml
- 검사 시간 : 15분



주문 정보

제품 번호	제품명	검체	포장 단위
VCF127DD	Vcheck fPL 2.0	혈청, 혈장, 전혈	10 Tests/Kit



(주)바이오노트 18449 경기도 화성시 삼성1로 4길 22
TEL: 031-211-0516 | FAX: 031-8003-0618 | www.bionote.co.kr