

CHW Ag 2.0 _개 심장사상충 항원 진단 키트 2.0

제품 소개

효능/효과 : 개 심장사상충 항원 검출

사용검체 : 전혈, 혈청, 혈장

제품구성 :


- BIONOTE Rapid CHW 항원 검사 디바이스
- 점적용 드롭퍼
- 항응고제 처리용 튜브

특징 :

- CHW 항원 신속진단
- 암컷 성충 수 1~5마리도 검출 가능
- 민감도 99.5%, 특이도 94%



검사 방법

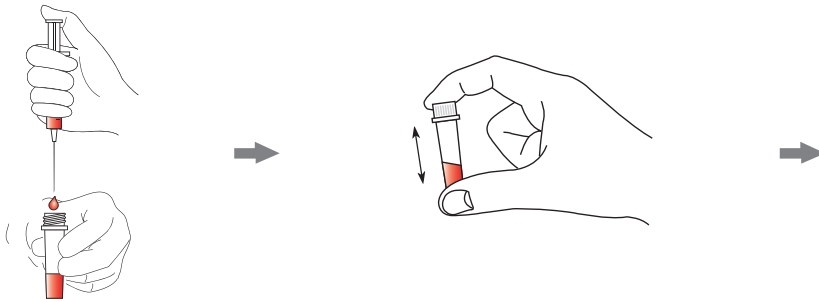

1. 검체를 준비한다. 전혈 사용 시 채혈 후 첨부된 EDTA tube에 담겨 가볍게 흔들어 주며 항응고제 처리를 한다.



2. 첨부된 드롭퍼를 이용하여 점적홀에 2~3방울 떨어뜨린다.

제품 정보

제품번호	제품명	제품유형	포장단위
RG1102DD	CHW Ag 2.0	Device	10 Tests/Kit